

Produceret i Danmark af



HLD Wipes



*DESINFEKTION & RENGØRING TIL
LÆGEMIDLER OG ENHVER OVERFLADE*

Primære funktioner HLD Wipes er:

- Desinfektion og rengøring på højt niveau.
- Indeholder ikke klor- eller aldehydforbindelser.
- Effektiv mod bakteriesporer f.eks. Clostridium difficile (C dif), Bacillus cereus osv.
- Effektiv over en lang række patogener, herunder mycobakterier, vira, bakterier, svampe, gær og skimmelsvampe, herunder MRSA, Hepatitis B og HIV.
- Effektiv mod de vanskelige ikke-indhyllede vira som Polio, Adenovirus og Norovirus.
- Ikke-fiksativ.
- Ikke-ætsende - beskadiger ikke sarte belægninger.
- Ingen aktivering påkrævet.
- Omkostningseffektiv.
- Ingen dampe.
- Testet i henhold til EN14885 for desinfektionsegenskaber

Garanteret beskyttelse og ydeevne, der giver total infektionskontrol - sikkert.

HLD = High Level Desinfektion

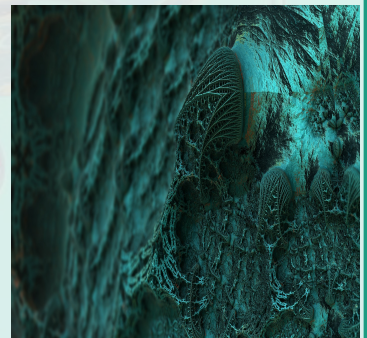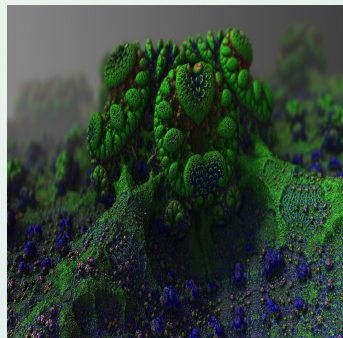

HLD Wipes

DESINFEKTION & RENGØRING TIL
LÆGEMIDLER OG ENHVER OVERFLADE

Generelt

HLD er et patenteret dokumenteret HLD (højt niveau desinfektionsmiddel). Formuleringen indeholder ikke farlige aldehyder eller klordannende komponenter. HLD Wipes er yderst effektiv som en renere og terminal HLD mod bakteriesporer, mycobakterier, bakterier, svampe og vira. Produktet er designet til at eliminere risikoen for krydsinfektion fra sporer, TB, vira, svampe og bakterier. Gør ikke blot mikroorganismene inaktive, men det er påvist, at de dræber disse ved at forstyrre mikroorganismernes RNA. Det er sikkert at bruge på enhver overflade og er lugtfri og farveløs.

Applikation

HLD wipes er spordræbende servetter, der er ideelle til fjernelse af biofarer på hospitaler, sundhedscentre, tandlæger, dyrlæger, plejehjem, laboratorier, madlavningsområder og ethvert miljø, hvor risikoen for krydsinfektion skal elimineres, f.eks. krydstogtskibe, desinficering af frisørustyr osv. HLD Wipes er ideelle til rengøring og desinfektion af faste overflader, vægge, gulve og glasarbejde. HLD Wipes er ideelle til HLD (High Level Desinfection) af medicinsk udstyr og kirurgisk instrumentering.

Emballage Ready to use

- 225 stk tube beholder



Brugervejledning

Præimprægnerede HLD wipes leveres i beholdere og er klar til brug direkte fra beholderen.

Ved generel overfladerensning og sundhedsmiljø:

Tag en serviet og aftør forsigtigt over hele det område, der skal rengøres. Tillad en minimum kontakttid på 1 minut, før du tørrer af for at fjerne fedt, blod og organisk snavs. Fjernelse af stædige aflejringer kan hjælpes ved brug af en stiv børste. Skyl den behandlede overflade med rent vand, hvis det er nødvendigt.

Bemærk: Overflader til madlavning skal have lov til at tørre inden brug.

Til desinfektion af medicinske, kirurgiske og tandlægeinstrumenter og udstyr:

Tør alle overflader af instrumentet (helst adskilt, hvor det er relevant) ved hjælp af en præimprægneret MLD Wipes og lad væsken forblive i kontakt i mindst 5 minutter. Undersøg instrumentet, og aftør eller børst det for at fjerne resterende snavs. Skyl det behandlede instrument i sterilt, koldt vand og lad det tørre. Udskift brugte MLD Wipes ofte, eller når tydelig tilsmudsning af serviet bliver tydeligt.



BioGroup
CVR: 3845 6229
Roholmsvej 10N
2620 Albertslund
Tlf: +45 4271 8228
Web: www.biogroup.dk
Mail: nl@biogroup.dk

Forhandles af:

HLD Wipes

Aktiv mod	C-EN Standards	Kontaktid
Mycobacterier	EN14348 Mycobacterium terrae Mycobacterium tuberculosis EN14563 Mycobacterium terrae Mycobacterium avium	1 min 1 min 5 min 5 min
Svamp/gærsvamp	EN1275, EN1650 EN13624, EN14562, EN16615	1 min 5 min
Bakterier	EN1276, EN13727, EN13697, EN14561, EN16615	1 min 5 min
Virus/Vira	EN 14476 Polio, Adeno & Noro HIV, Hep B & C	5 min 1 min
Sporer	EN13704 EN14347	2 min 1 min
Aktive ingredienser: Bis (3-aminopropyl) dodecylamin. Didecyldimethylammoniumchlorid		



BioGroup
CVR: 3845 6229
Roholmsvej 10N
2620 Albertslund
Tlf: +45 4271 8228
Web: www.biogroup.dk
Mail: nl@biogroup.dk

Forhandles af: